


Thermo Scientific™ OWL™ A6 Büyük Jel Sistemi

Jel boyutu: 23 x 25 cm
Çalışma tampon hacmi: 3L

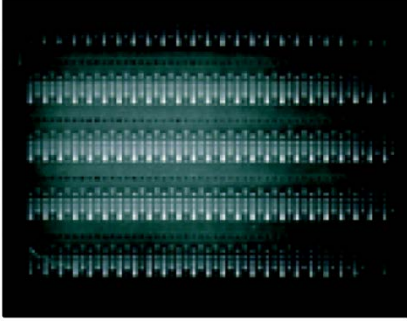


OWL™ A6 EasyCast Büyük Jel Sistemimiz ile aynı anda, tek jelde 500 örnek koşuturulabilir. Cihaz her araştırmacının çalışma alanında olmasını isteyeceği nitelikte olup, yeterince ekonomiktir. Sağlamlığı ve kolay kullanımı yüksek hacimli araştırmacılar ve ayrıntılı DNA/RNA analizleri için ideal bir seçimdir


OWL çok çeşitli tarak seçenekleri sunar. UV geçirgen jel tepsi üzerinde 14 tarak yuvası vardır. Bu şekilde örneklerinizi farklı uzunluklarda koşutabilirsiniz. Kaliteli, tek parça taraklar kullanım için ayrıca tarak düzeneği gerektirmez. UV geçirgen jel tepsi ile bantlar kolaylıkla görülür ve bantlar floresan cetvel ile kolayca ölçülür.

Tarak Seçenekleri

Katalog No.	Tarak Tipi	Dış Sayısı	Dış Kalınlığı	Dış Geniřlięi	Önerilen Örnek Yükleme Hacimleri			
					0.25cm ²	0.5cm ²	0.75cm ²	1.0cm ²
D3-MTC	Hızlı yükleme	25(1x)	1.0mm	7.5mm	6 µl	20 µl	34 µl	48 µl
	Hızlı yükleme	25(1x)	1.5mm	7.5mm	8 µl	30 µl	51 µl	72 µl
D3-MT2C	Hızlı yükleme	50(2x)	1.0mm	3.0mm	2 µl	8 µl	14 µl	19 µl
D3-MT2D	Hızlı yükleme	50(2x)	1.5mm	3.0mm	3 µl	12 µl	20 µl	29 µl
D3-WALL	Bölme	1	1.5mm	230mm	-	-	-	-

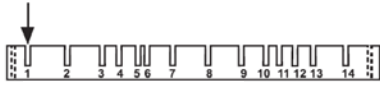

Tek tarak ile 23.2cm

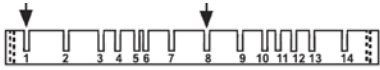

İki tarak ile 2 adet 11.4cm



Üç tarak ile 3 adet 7.5cm




Dört tarak ile 4 adet 5.5cm



Beş tarak ile 5 adet 4.4cm



On tarak ile 10 adet 2.0cm

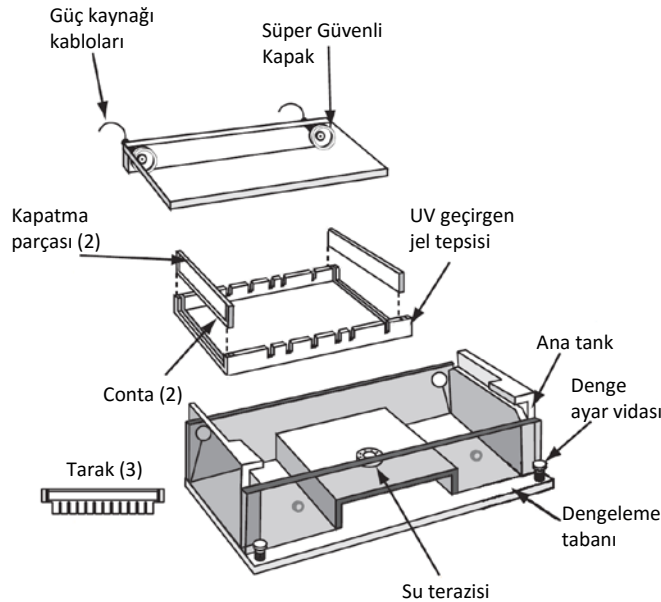

Sistem ařaęıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Ana tank
- SüperGüvenli Kapak ve buna baęlı Güç Kaynaęı Kablo ve Uçları
- EasyCast Contalı UV geçirgen Jel Tepsi
- 2 adet 25 ve 2 adet 50 dięli, 1.5 mm kalınlıkta 4 adet tarak